



RMET - 03

Carro Rojo

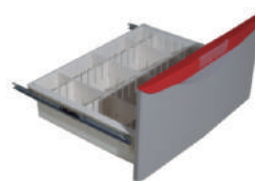

- Material ABS, Aluminio y Acero Inoxidable
- Ruedas silenciosas giratorias con frenado
- 5 Cajones, 2 chicos, 2 medianos y 1 grande
- Contenedor para punzocortantes
- Permite su uso desde la lateral izquierda o derecha

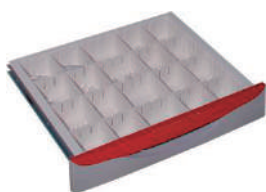

RMET-11

Puede ser utilizado en diferentes departamentos: vehículos de emergencia, vehículos de tratamiento o vehículos de medicamento.

Parte superior

La superficie superior del carro rojo es de plástico ABS. Cuenta con un contenedor para objetos punzocortantes y su diseño empotrado evita que los artículos se deslicen. Está equipado con barandales en ambos lados fabricados de acero inoxidable. Su diseño permite el uso del carro rojo desde la lateral izquierda o lateral derecha.

Lateral izquierda

La plataforma de desfibrilador se puede reemplazar con un marco de infusión. Cuenta con un cajón de expedientes desmontable.

Lateral derecha

El portasueros ajustable se puede desmontar para colocar una plataforma en la lateral izquierda o derecha. Cuenta con un bote de desechos.

Parte trasera

Detrás del carro rojo se cuenta un tablero de desfibrilación, 1 porta tanque de oxígeno y 1 cable de alimentación.

Parte frontal

Esta equipado con 5 cajones:

- Los dos cajones chicos cuentan con un espacio interno de 43 x 33.5 x 6.8 cm con divisores de extracción de 8 cm.
- Los dos cajones medianos cuentan con un espacio interno de 43 x 33.5 x 11 cm con divisores de extracción de 24 cm.
- El cajón grande cuenta con un espacio interno de 43 x 33.5 x 22 cm, existen separadores de 3 x 3 en el cajón.

Las manijas son de tipo arco, tiene cerradura y cuenta con una ranura transparente anti polvo e impermeable para colocar una tarjeta de identificación. de medidas 11.5 x 2.8 cm.

Parte inferior

4 Ruedas giratorias, silenciosas, antiestáticas con sistema de frenado

Especificaciones

Dimensiones: 75 x 47.5 x 93 cm

Dimensiones del embalaje: 77 x 54 x 97 cm

Peso bruto: 45.4 kg

Materiales: Principalmente de aluminio, acero y ABS



ROYAL MEDITECH

ROYAL MEDITECH CO., LTD
3er & 4to Piso, Edificio-B, No. 2 Carretera Jingye, 3a Área Industrial Yanchuan, Ciudad Songgang
Distrito Bao'an, Shenzhen 518105 P.R. China
Tel: +86 - 755 - 3693 9358 +86 - 755 - 3685 3866
Fax: +86 - 755 - 8179 2102
Correo: sales@ecomedhk.com www.royalmeditech.com.cn

